

Date d'édition : 15.04.2026

Ref : EWTGUET256.01

**ET 256.01 Alimentation de laboratoire 0...42 V, 0...6 CC,  
100 W (Réf.061.25601)**



Le bloc d'alimentation de laboratoire ET 256.01 permet de réaliser des essais très importants parmi ceux que l'on peut réaliser avec IET 256.

LET 256.01 remplace alors les modules photovoltaïques de IET 250.

Le courant et la tension peuvent être ajustés de manière individuelle.

Cela permet de simuler des points de mesure sur des caractéristiques typiques courant-tension de modules photovoltaïques.

Des résultats de mesure de IET 250 avec différents éclairagements sont inclus dans la documentation didactique de IET 256 et peuvent servir de référence pour les séries d'essais avec IET 256.01.

Des éléments de commande situés sur le panneau avant permettent de commander le bloc d'alimentation de laboratoire.

Les connexions par câbles de IET 256 sont établies par des douilles de sécurité.

Le bloc d'alimentation de laboratoire est équipé d'une protection contre la surchauffe.

Un logiciel de commande à distance par connexion USB sur le panneau avant est disponible en option auprès du fabricant du bloc d'alimentation de laboratoire.

#### Contenu didactique/essais

en association avec IET 256:

fonctionnement d'une installation frigorifique à compression avec du courant continu

influence du courant et de la tension sur le comportement en service de l'installation frigorifique

commande/régulation d'une installation frigorifique solaire pour différentes puissances d'alimentation électrique

#### Les grandes lignes

bloc d'alimentation de laboratoire pour le fonctionnement de IET 256

mise à disposition de courant continu en remplacement des modules photovoltaïques

variation ciblée du courant et de la tension

#### Les caractéristiques techniques

Plages d'ajustages

courant: 0-6A

tension: 0-42V

Puissance nominale: 100W

Température de fonctionnement: 0-50°C

Alimentation: 230V, 50Hz, 1 phase

#### Dimensions et poids

Date d'édition : 15.04.2026

Lxlxh: 174x90x263mm  
Poids: env. 2kg

Liste de livraison

- 1 appareil de test
- 1 câble de connexion
- 1 notice


Accessoires disponibles et options  
requis

ET 256 Refroidissement avec l'électricité de cellules solaires

## Options

Ref : EWTGUET256

**ET 256 Groupe froid alimenté par énergie solaire photovoltaïque, alimentation 10...45 V CC**  
avec interface PC USB et logiciel inclus

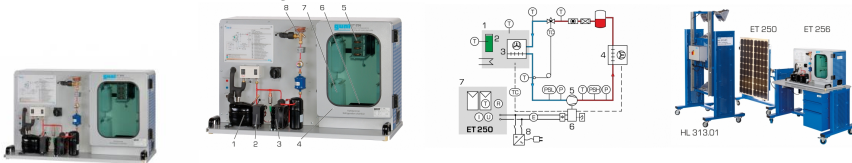

Avec l'augmentation au niveau mondial des besoins en froid, on s'intéresse de plus en plus aux procédés de production du froid fonctionnant avec des sources d'énergie renouvelables.

Dans ce cadre, l'exploitation de l'électricité solaire présente des avantages indéniables en particulier pour les applications mobiles ou excentrées.

L'ET 256 comprend une installation frigorifique à compression typique avec chambre de refroidissement.

Elle présente la particularité de permettre une alimentation électrique directe du compresseur d'agent réfrigérant par des modules photovoltaïques.

Il suffit pour cela de raccorder les modules photovoltaïques de l'ET 250 à l'ET 256.

Pour certains des essais, on peut également utiliser le bloc d'alimentation de laboratoire ET 256.01 disponible.

La source de lumière artificielle HL 313.01 permet d'effectuer des tests sur l'énergie solaire indépendamment de la lumière naturelle.

Le compresseur d'agent réfrigérant est un compresseur à piston avec vitesse de rotation ajustable.

Une soupape de détente thermostatique est placée dans le circuit frigorifique.

La chambre de refroidissement isolée contient un évaporateur d'agent réfrigérant avec ventilateur, des accumulateurs de froid amovibles et un dispositif de chauffage pour la production d'une charge de refroidissement.

Pour répondre à un besoin de refroidissement, l'unité de commande met en marche le compresseur à condition que la puissance électrique des modules solaires soit suffisante.

Le fonctionnement du compresseur fait baisser la température de la chambre de refroidissement.

En cas de décharge partielle ou totale des accumulateurs de froid, ces derniers sont rechargés dès lors que la température est revenue à un niveau suffisamment bas.

Si il n'y a pas d'électricité disponible pour faire fonctionner le compresseur, alors les accumulateurs de froid augmentent la durée de refroidissement restante dans la chambre froide en se déchargeant.

Les valeurs de mesure pertinentes sont enregistrées par des capteurs, affichées et peuvent être traitées sur un PC.

Le débit massique de réfrigérant est calculé dans le logiciel à partir des valeurs mesurées enregistrées.

Contenu didactique / Essais

alimentation d'une installation frigorifique à compression avec de l'électricité issue de modules photovoltaïques

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[www.systemes-didactiques.fr](http://www.systemes-didactiques.fr)



Date d'édition : 15.04.2026

composants d'une installation frigorifique photovoltaïque  
fonctionnement du compresseur en cas de variation de la puissance et des besoins en froid  
charge et décharge des accumulateurs de froid  
coefficient de performance de l'installation frigorifique en fonction des conditions de fonctionnement  
cycle frigorifique dans le diagramme log p,h  
établissement du bilan des flux d'énergie

#### Les grandes lignes

installation frigorifique à compression pour le fonctionnement avec des modules photovoltaïques ET 250 ou le bloc d'alimentation de laboratoire ET 256.01  
longue durée de refroidissement grâce aux accumulateurs de froid et à l'isolation  
logiciel pour la commande et l'établissement du bilan des flux d'énergie  
enregistrement dynamique du débit massique de réfrigérant

#### Caractéristiques techniques

##### Compresseur

- vitesse de rotation: 2000?3500min-1
- puissance frigorifique: env. 90W à 0/55°C et 2000min-1
- puissance électrique absorbée: env. 46W à 0/55°C et 2000min-1

##### Appareil de commande

- plage de tension d'entrée: 10?45V DC
- Chambre de refroidissement: Lxlxh: 400x250x500mm
- Accumulateurs de froid: transition entre phases: 5?6°C

##### Réfrigérant

- R513A
- GWP: 631
- Charge : 1kg
- CO2-equivalent: 0,6t

##### Plages de mesure

- température: 4x -30?80°C, 3x 0?120°C
- pression: 2x 0?6bar, 2x 0?30bar
- courant: 0?10A
- tension: 0?60V
- débit: 0?11kg/h (agent réfrigérant)

##### Nécessaire au bon fonctionnement

Alimentation: 230V, 50Hz, 1 phase

##### Dimensions et poids

Lxlxh: 980x400x580mm  
Poids: env. 65kg

##### Liste de livraison

1 appareil d'essai  
1 jeu de câbles  
1 CD