




Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.11.2025

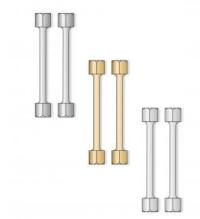

Ref: EWTGUWP500.01

WP 500.01 6 échantillons pour essai de torsion (Réf. 020.50001)

Ce jeu déprouvettes est disponible en accessoire pour lappareil dessai WP 500.

Léprouvette est montée dans le domaine dessai de WP 500.

Pour la fixation, les extrémités des éprouvettes sont munies de bords hexagonaux de 17 mm.

Lors de lessai, des éprouvettes métalliques sont tordues jusquà leur destruction suite à une rupture de cisaillement typique.

Contrairement aux essais de traction et de flexion, la torsion a un état de contrainte à deux axes.

Dans léprouvette, des contraintes de cisaillement sont produites qui déforment léprouvette.

La déformation se manifeste comme une torsion des deux extrémités déprouvette lune par rapport à lautre.

Le jeu comprend respectivement deux éprouvettes de traction en acier (11SMn30+C), aluminium (AlMgSi1) et en laiton (CuZn39Pb3).

Caractéristiques techniques

Éprouvettes, acier, aluminium, laiton

- longueur: 115mm
- longueur de serrage: 75mm
- diamètre déprouvettes dans section de mesure: 6mm
- encastrements: SW17

requis

WP 500 Essai de torsion, 30Nm

en optior

WP 500.90 Instrument de mesure de l'angle de torsion

Options




Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.11.2025

Ref: EWTGUWP500

WP 500 Essai de torsion, 30Nm (Réf. 020.50000)

Contient : appareil d'essai de torsion complet, 6 échantillons, documentation didactique

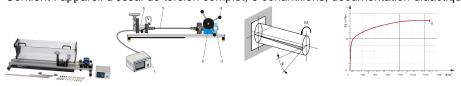

Lessai de torsion fait partie des méthodes dessai destructif, et étudie le comportement plastique des matériaux. Dans la pratique, on se sert de cette méthode dessai pour tester des composants qui sont tordus pendant leur utilisation, comme par exemple les vis, arbres, axes, fils et ressorts.

Lappareil dessai WP 500 permet de réaliser des essais de torsion, durant lesquels des éprouvettes sont tordues jusquà la rupture.

Grâce à la clarté du montage et à la facilité dutilisation, on peut observer tous les détails et les phases de lessai.

Lors de lessai, des éprouvettes métalliques sont tordues jusquà leur destruction, suite à une rupture de cisaillement typique.

Le moment de torsion est appliqué manuellement par le biais dune roue à main et dun engrenage à vis sans fin. La plaque de base est renforcée contre la torsion. Un capot de protection transparent protège des éclats.

Le moment de torsion efficace est mesuré au moyen dun couplemètre équipé de jauges de contrainte, et peut être lu directement sur un affichage.

Langle de torsion est enregistré par un codeur incrémental et peut lui aussi être lu directement.

Les valeurs de mesure sont transmises vers un PC, afin dy être évaluées à laide du logiciel.

Des éprouvettes constituées de divers matériaux, et de longueurs différentes, sont comprises dans la liste de livraison.

Pour sadapter aux différentes longueurs des éprouvettes, le dispositif de mesure peut être déplacé sur le bâti rigide.

Contenu didactique / Essais

- essais de torsion avec différents matériaux et jusquà la rupture de léprouvette
- détermination de la résistance à la torsion
- enregistrement du diagramme moment de torsion-angle de torsion
- influence
- -- du matériau de léprouvette
- -- de la section de léprouvette
- -- de la longueur de léprouvette

Les grandes lignes

- génération du moment de torsion par un engrenage à vis sans fin
- mesure du moment de torsion avec un couplemètre
- codeur incrémental pour lenregistrement de langle de torsion

Les caracteristiques techniques Moment de torsion max.: 30Nm

Dispositif de charge, engrenage à vis sans fin

- rapport de transmission: 1:63

Logement des éprouvettes: 2x17mm, hexagonal

Éprouvettes

- diamètre: 6mm
- 4x 75mm, acier
- 4x 75mm, aluminium



Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.11.2025

- 4x 75mm, laiton
- 2x 175mm, acier
- 2x 350mm, acier
- 2x 700mm, acier

Measuring ranges

- couple: 0...30,0Nm
- angle de torsion: 0...±3200°, résolution: 0,1°

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids

Lxlxh: 1400x700x500mm (appareil dessai)

Lxlxh: 230x210x120mm (amplificateur de mesure)

Poids: env. 43kg (total)

Necessaire au fonctionnement PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

- 1 appareil dessai
- 1 amplificateur de mesure
- 1 jeu déprouvettes de torsion
- 1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
- 1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options

WP300.09 - Chariot de laboratoire

WP500.01 - 6 échantillons pour essai de torsion

WP500.90 - Instrument de mesure de l'angle de torsion

Produits alternatifs

WP510 - Essai de torsion 200Nm, entraînement moteur